

# SCHEDA TECNICA BODY ARMOR® PRO TERM

DARCO

TRATTAMENTO E GESTIONE POST AMPUTAZIONE/ LISFRANC/ CHOPART.  
TUTORE GAMBA-PIEDE ALTO PNEUMATICO.



## COMPONENTI DEL PRODOTTO

- 1- COMPONENTI PREDISPOSTI DIRETTAMENTE ADATTABILI AL PAZIENTE
- 2- SPECIALE FODERA PROTETTIVA DOTATA DI SISTEMA PNEUMATICO STABILIZZANTE
- 3- STRUTTURA RIGIDA CON DUE CHIUSURE
- 4- PARTE MOVIBILE CHE PROTEGGE LA ZONA TIBIALE
- 5- FONDO CON SISTEMA POWERPODS®

## INDICATO PER

RIABILITAZIONE POSTOPERATORIA IN SEGUITO AD AMPUTAZIONI PARZIALI DEL PIEDE  
(AD. ES. AMPUTAZIONI DI CHOPART O LISFRANC) PER:

- SINDROME DEL PIEDE DIABETICO
- ARTEROPATIA PERIFERICA
- TRAUMA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Gambale stabile fino alla caviglia con soletta interna multistrato per ridurre il carico da pressione.

Il sistema pneumatico integrato e regolabile consente l'adattamento sul paziente.

Il prodotto contiene una linguetta di supporto tibiale flessibile.

Le chiusure a strappo regolabili garantiscono una buona stabilità.

## CARATTERISTICHE

### MATERIALI UTILIZZATI:

Rivestimento della suola esterna: EVA

Scocca in plastica: Polipropilene, PU

Fodera in tessuto: Poliestere

Fibbie: Ferro

Borchie: Ferro

Cinghie di chiusura: Nylon/PVC

Plantare: EVA e MTPU

CHIUSURA: 2 CINGHIE.

PACKAGING: PESO TUTORE M: GR 700 / L: GR 900 /

SACCHETTO NYLON

TEMPERATURE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO: - 5° | + 45°

LOTTO DI PRODUZIONE: COME DESCRITTO SULL'ETICHETTA

## PULIZIA DEL PRODOTTO

Se il prodotto è poco sporco, può essere ripulito con un panno umido o una spazzola morbida. Per pulire la scocca e il rivestimento interno usare acqua tiepida (possibilmente 30°) ed eventualmente un sapone delicato o un detersivo per capi delicati. Il rivestimento interno va sciacquato e asciugato subito. Non asciugarlo nell'asciugatrice o sul termosifone. Lasciare che si asciughi all'aria a temperatura ambiente.


## Taglie+Misure

NUOVE  
TAGLIE

Calzata ottimizzata:

si prega di notare le nuove taglie

Dimensione	Lunghezza moncone				
	Art-Nr.				
Soletta in cm	B	C	E		
<b>M</b>	19,5 cm	13,5	9,5	19,5	BAPT2
<b>L</b>	21,0 cm	14,0	10,5	21,0	BAPT3

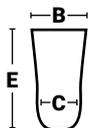

Indossabile sia a destra che a sinistra.

UNICO TUTORE PER LA GESTIONE DI AMPUTAZIONI LISFRANC E CHOPART

CODICE DI REPERTORIO / DISPOSITIVI MEDICI **2348803**

Cod.Nom.ISO **06.12.06.030**

Optima Molliter Srl

Company Certified under: ISO 9001:2015 IT319043 - ISO 13485:2016 IT319042

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060

info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

